

Electrodes de surface Ambu® Neuroline 715



Bénéfices clés

- Support microporeux transparent pour un positionnement précis du capteur
- Capteur Ag/AgCl pour un tracé d'excellente qualité
- Repositionnable
- Câbles reliés pour une manutention aisée

Types D'applications Recommandees

- Etudes de la conduction nerveuse (ECN)
- Electromyographie (EMG) de surface
- Potentiels évoqués (PE)
- Electronystagmographie (ENG)

Electrodes de surface Ambu® Neuroline 715

Le support microporeux transparent de l'électrode Ambu Neuroline 715 permet un positionnement précis du capteur sur la surface cutanée; conçu en argent/chlorure d'argent, ce capteur procure des signaux d'excellente qualité. De plus, grâce à son gel solide non agressif, le repositionnement multiple de l'électrode est facilité sans perte du pouvoir adhésif.

L'électrode de surface Ambu Neuroline 715 est disponible avec un choix de 4 longueurs de câbles avec codes couleurs.


Caractéristiques techniques

Dimensions	
Dimension de l'électrode (longueur x largeur)	30 x 22 mm
Dimension du contact avec la peau (longueur x largeur)	28 x 20 mm
Surface adhésive	474 mm ²
Epaisseur	1 mm
Capteur	
Matériau du capteur	Argent/Chlorure d'Argent (Ag/AgCl)
Nature du gel	Gel solide
Surface du capteur	54 mm ²
Surface du gel	474 mm ²
Caracteristiques Environnementales	
Electrodes sans PVC	Non
Electrodes sans latex	Oui
Câbles sans PVC	Non
Câbles sans latex	Oui
Emballage sans PVC	Oui

Connecteurs:



K = connecteur 1.5 mm

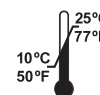

Température de conservation

Matériaux

Électrode	
Biocompatibilité	Oui
Capteur	Argent/Chlorure d'Argent (Ag/AgCl)
Support externe	Polyester non tissé
Adhésif externe	Gel solide
Connecteur	Cuivre/Polypropylène (PP)
Câble	Cuivre flexible
Revêtement isolant du câble	Polychlorure de Vinyle (PVC)
Plaquette	Film polyester siliconé
Emballage	
Feuillet interne du sachet	Polyéthylène (PE)
Feuillet intermédiaire du sachet	Aluminium (Al)
Feuillet externe du sachet	Papier
Boîtes	Carton

Configurations disponibles

Référence	Longueur du câble en cm	Couleurs	Validité en mois		Quantité		
			Sachet fermé	Sachet ouvert	sachet	boîte	carton
715 05-K/C/12	50	■ ■ ■	24	1	12	240	1920
715 08-K/C/12	80	■ ■ ■	24	1	12	120	960
715 12-K/C/12	120	■ ■ ■	24	1	12	120	960
715 20-K/C/12	200	■ ■ ■	24	1	12	120	960

Instructions d'utilisation

Préparer la peau à l'aide d'une pâte abrasive Dégraisser la surface cutanée avec un tampon imbibé d'alcool. Décoller l'électrode de la plaquette et l'appliquer sur la peau. L'électrode peut être repositionnée plusieurs fois pour de meilleurs résultats.

Precautions

Dispositif exclusivement conçu pour un usage patient unique. Destiné à la surveillance et l'enregistrement des bio potentiels de la peau.

Ambu Sarl

Les Bureaux du Parc -
Rue Jean Gabriel Domergue
33070 Bordeaux Cedex
Tél. : +33 5 57 92 31 50
Fax : +33 5 57 92 31 59
www.ambu.fr
www.ambu-shop.fr

