


# Ambu® Insufflateurs Oval Plus Silicone

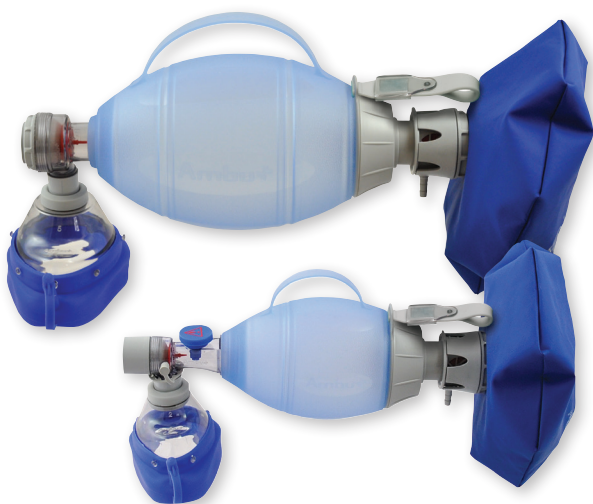

## Caractéristiques / Bénéfices

- **Réduction de la fatigue pendant la ventilation manuelle** La conception ergonomique et la texture spécifique du ballon assurent à l'opérateur une excellente prise en main. La poignée de préhension réduit la fatigue, assure une prise ferme et sécurise la ventilation.
- **Un positionnement facile du ballon.** La valve patient à raccord tournant facilite le positionnement de l'insufflateur sans interruption de la ventilation.
- **Nettoyage et stérilisation simplifiée** L'insufflateur est facile à démonter et à réassembler. Toutes les pièces supportent un passage à l'autoclave à 134°C.
- **Légereté du système** La manipulation est optimale en cas de ventilation prolongée

## Ambu® Insufflateurs Oval Plus Silicone

L'insufflateur dispose de la valve patient à clapet unique qui équipe également le modèle Ambu Mark IV rendant la compatibilité possible entre les deux ballons. La silicone transparente garantit une bonne visualisation des conditions de ventilation du patient.

L'insufflateur Ambu Oval Plus Silicone est un insufflateur réutilisable conçu pour la ventilation des patients adulte, pédiatrique et bébé.

Le format de l'insufflateur bébé est particulièrement adapté à une utilisation dans les incubateurs. Le tuyau réservoir offre la possibilité de diriger l'oxygène vers le nez et la bouche du nouveau-né en utilisant le flux lors de la respiration spontanée.

Le raccord de sortie de la valve permet le montage direct de la valve PEP Ambu.

La texture en silicone de l'insufflateur combinée à sa poignée de préhension permettent une prise en main confortable et préviennent les éventuels problèmes de fatigue en cas de ventilations prolongées.

L'ensemble est optimisé pour visualiser les réactions du patient pendant la ventilation. La valve avec soupape de surpression blocable tarée à 40 cm H<sub>2</sub>O équipe les versions Enfant/Bébé conformément à la réglementation\*.

\* Les directives internationales recommandent que les insufflateurs manuels enfants et pédiatriques soient équipés d'une soupape de surpression afin que l'air n'excède pas 45 cm H<sub>2</sub>O.

## Spécificités techniques

Description	
Les versions adulte et pédiatrique délivrent respectivement des volumes maximum de 700 ml et 450 ml.	
Ne contient pas de latex. Les ballons sont en caoutchouc silicone	
Plage d'application adultes et enfants d'un poids supérieur à 30 kg (10 ans environ). Volume 1475 ml. Dimensions (longueur x diamètre) 291 mm x 128 mm	
Plage d'application enfants compris entre 10 kg et 30 kg. Volume 635 ml. Dimensions (longueur x diamètre) 245 mm x 99 mm	
L'insufflateur Ambu Oval Silicone Plus supporte le passage à l'autoclave à 134 °C .	
Volume du réservoir d'oxygène : 1500 ml	
Raccord patient	Externe 22 mm (ISO) Interne 15 mm (ISO)
Raccord expiratoire (pour la fixation de la valve PEEP)	30 mm male (ISO)
Fuites (dans les deux sens) :	Non mesurable
Température d'utilisation :	-18 °C à 60 °C et une humidité entre 15 % et 95 %
Température de stockage :	-40 °C à 60 °C et une humidité entre 40 % et 95 %



Réservoir O<sub>2</sub> fermé

## Références de commande

Références	Désignation
470 018 000	Insufflateur Ambu Oval Plus Silicone Adulte, avec valve 1 clapet, sans masque et sans réservoir
470 015 000	Insufflateur Ambu Oval Plus Silicone Adulte, avec valve 1 clapet, sans masque avec réservoir O <sub>2</sub> 1,5 l
470 016 000	Insufflateur Ambu Oval Plus Silicone Adulte, avec valve 1 clapet, avec masque monobloc T5, et réservoir O <sub>2</sub> 1,5 l
470 017 000	Insufflateur Ambu Oval Plus Silicone Adulte, avec valve 1 clapet, avec masque transparent à bourrelet gonflable T5, et réservoir O <sub>2</sub> 1,5 l
370 041 000	Insufflateur Ambu Oval Plus Silicone Enfant/Bébé, avec valve 1 clapet, sans masque avec réservoir O <sub>2</sub> 1,5 l
370 042 000	Insufflateur Ambu Oval Plus Silicone Enfant/Bébé, avec valve 1 clapet, avec masque monobloc taille 1 et réservoir O <sub>2</sub> 1,5 l
370 043 000	Insufflateur Ambu Oval Plus Silicone Enfant/Bébé, avec valve 1 clapet, avec masque monobloc taille 2 et réservoir O <sub>2</sub> 1,5 l
370 044 000	Insufflateur Ambu Oval Plus Silicone Enfant/Bébé, avec valve 1 clapet, avec masque à bourrelet gonflable taille 0 et réservoir O <sub>2</sub> 1,5 l
370 045 000	Insufflateur Ambu Oval Plus Silicone Enfant/Bébé, avec valve 1 clapet, sans masque ni réservoir O <sub>2</sub>

Sales Company  
**Ambu sarl**  
 Les Bureaux du Parc  
 Rue Jean Gabriel Domergue  
 33000 Bordeaux France  
 Tél. : (33) 05 57 92 31 50  
 Fax : (33) 05 57 92 31 59  
 Site internet : [www.ambu-shop.fr](http://www.ambu-shop.fr)  
[www.ambu.fr](http://www.ambu.fr)

Manufacturer  
**Ambu A/S**  
 DK-2750 Ballerup  
[www.ambu.com](http://www.ambu.com)