

# Ambu® Redi-ACE Adulte & Redi-ACE Mini



## Caractéristiques principales

- **Utilisation facile**

Mise en forme automatique grâce à sa mentonnière sécurisée.  
Mise en place sur le patient en 3 étapes: sélection de taille - Verrouillage de la taille sélectionnée - Positionnement.

- **2 colliers pour tous les patients**

14 tailles qui s'adaptent à toutes les morphologies (adulte & pédiatrique)

- **Pratique**

Ambu Redi-ACE se stocke à plat pour un rangement le plus compact possible. Ses crochets porte sonde d'intubation sont adaptés à une utilisation extra-hospitalière.

## Ambu® Redi-ACE Adulte & Redi-ACE Mini

Les colliers Ambu Redi-ACE et Ambu Redi-ACE Mini sont des colliers cervicaux ajustables uniques destinés à l'immobilisation du rachis.

Conçus en matériau radiotransparent, ils disposent d'une mentonnière sécurisée; la mise en forme est automatique.

La mise en place sur le patient se fait en 3 étapes rapides:

- sélection de taille
- verrouillage de la taille sélectionnée
- positionnement

Les ergots de verrouillage permettent un ajustement précis à la taille du cou de la victime. Chaque collier est muni de crochets porte sonde adaptés à une utilisation extra-hospitalière.

Disponibles en 8 tailles et 6 tailles pédiatriques, les colliers se rangent à plat pour un stockage le plus compact possible et s'adaptent à la morphologie de tous les patients.

## Descriptions

Ambu Redi-ACE	
Nombre de réglages	8 réglages
Dimensions	554 x 215 x 14 mm
Poids	200 g
Couleur	Bleu/gris clair
Transparence	Compatible Rayons X et IRM
Température de stockage	-30° à +70° C
Température d'utilisation	-10° à +40° C
Ambu Redi-ACE Mini	
Nombre de réglages	6 réglages
Dimensions	447 x 188 x 14 mm
Poids	100 g
Couleur	Jaune/gris clair
Transparence	Compatible Rayons X et IRM
Température de stockage	-30° à +70° C
Température d'utilisation	-10° à +40° C

## Matériaux

Taille	
Ambu Redi-ACE	
Plastique Blanc/gris clair	Polypropylène
Mousse	Polyéthylène
Ambu Redi-ACE Mini	
Plastique jaune	Polypropylène
Mousse	Polyéthylène

## Références de commande

Références	Description
472 001 000	Collier cervical Redi-ACE
472 002 000	Collier cervical Redi-ACE Mini

Sales Company  
**Ambu sarl**  
 Les Bureaux du Parc  
 Rue Jean Gabriel Domergue  
 33000 Bordeaux France  
 Tél. : (33) 05 57 92 31 50  
 Fax : (33) 05 57 92 31 59  
 Site internet : [www.ambu-shop.fr](http://www.ambu-shop.fr)  
[www.ambu.fr](http://www.ambu.fr)


Manufacturer  
**Ambu A/S**  
 DK-2750 Ballerup  
[www.ambu.com](http://www.ambu.com)



Ambu Redi-ACE Adulte



Ambu Redi-ACE Mini

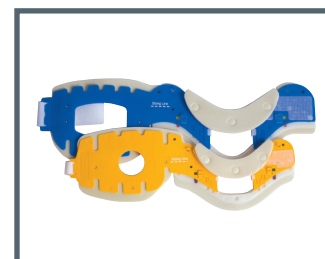

Stockage à plat



Ergot de verrouillage de taille



Crochet de fixation de sonde